

Hvordan få en smart insulinpenn?

Ta kontakt med din diabetesbehandler på sykehus eller fastlegekontor for å få mer informasjon om pennene.

Du kan også lese mer om smarte insulinpenn her novonordisk.no



Novo Nordisk Norway AS
Nydalsveien 28 · Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo
www.novonordisk.no · NO 918 229 353 MVA


NovoPen® 6) NovoPen Echo® Plus))

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus




NO21NP600011 Desember 2021

Smarte insulinpennner

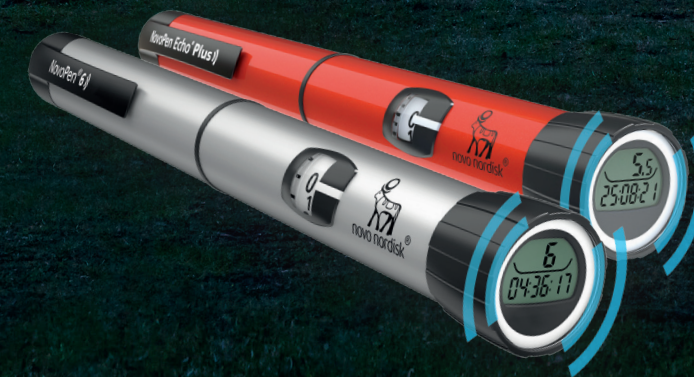

NovoPen® 6) NovoPen Echo® Plus))

Hvorfor bruke smarte insulinpennner?

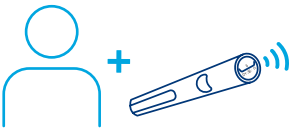

Hjelper deg å huske dose og tid siden forrige injeksjon

Pennene har minnefunksjon, slik at hver dose automatisk lagres i pennens minne.

Etter hver injeksjon kan du se hvilken dose som ble satt og tid siden forrige injeksjon. Pennen lagrer de 800 siste injeksjonene.



Nedlastning av injeksjonshistorikk

Injeksjonshistorikken fra pennens minne kan enkelt lastes ned til compatible apper.

Dette gjør at du kan se dosene som er satt sammen med blodsukkerinformasjonen.*

Dette kan gi bedre innsikt i behandlingen.




Enkelt å dele injeksjonshistorikken med din behandler

Du kan enkelt dele injeksjonshistorikken med din behandler, slik at behandlingsveiledningen blir enda bedre tilpasset dine behov.**

* Forutsetter bruk av kontinuerlig glukosemåler (CGM).
** Overføring av injeksjonshistorikk til din behandlers datasystem forutsetter at du ønsker å dele disse opplysningene.

Hvordan bruke smarte insulinpennner?

- 1 Last ned en NovoPen® 6- og NovoPen Echo® Plus-kompatibel app på din mobiltelefon, nettbrett eller PC.*
Snakk med din behandler om hvilken app du kan bruke.
- 2 Bruk pennen som vist i pakningsvedlegget. Pakningsvedleggene kan også lastes ned ved å skanne QR-kodene på neste side.
- 3 Overfør injeksjonshistorikken fra pennen til den aktuelle enheten via nærfeltkommunikasjon (NFC).
- 4 Se injeksjonshistorikken sammen med blodsukkerinformasjonen i appen.**

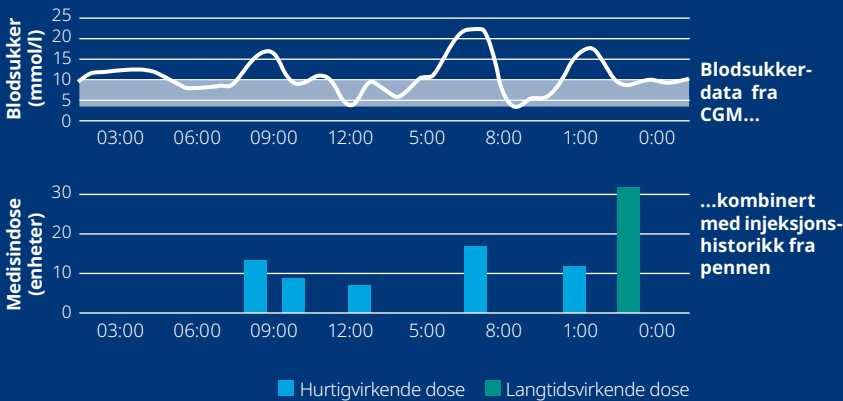

* Hvis du allerede bruker en NovoPen® 6- eller NovoPen Echo® Plus-kompatibel app, trenger du ikke å laste ned på nytt.
** Forutsetter bruk av kontinuerlig glukosemåler (CGM). For oversikt over tilgjengelige CGM systemer i Norge og deres rangering i anbudet, se <https://sykehusinnkjop.no/nasjonale-avtaler/insulinpumper-cgm-og-forbruksmaterieill-#produkter-pa-avtale>.

NovoPen® 6 og NovoPen Echo® Plus

Skann QR-koden for å lese pakningsvedlegget til pennene:

NovoPen® 6



NovoPen® 6 kan gi opptil 60 enheter per injeksjon, med dosesteg på 1 enhet.

NovoPen Echo® Plus



NovoPen Echo® Plus kan gi opp til 30 enheter per injeksjon, med dosesteg på 0,5 enhet.

Pennen krever ingen lading og har en garanti på 3 år.